
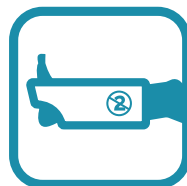


DECUHEEL™

THE CURE IS CARE

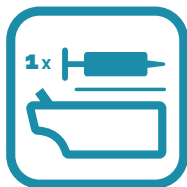

Decumed ApS · Skovringen 3 · DK - 2950 Vedbæk · +45 40168632 · sb@decumed.com

WWW.DECUMED.COM

Version 082014





Decuheel oppblåsbar helløfter til engangsbruk

- Helløfteren må kun brukes til forebygging av helsår, i forbindelse med behandling av helsår og til elevasjon av hel. Fold ut helløfteren. Innfør pumpespissen i den selvlukkende ventilen. Pump helløfteren opp 3/4, ikke mer. Helløfteren skal ikke pustes helt opp. Hvis den blir for hard kan dette føre til skade på pasienten samt beskadigelse av selve helløfteren.
- Helløfteren er nå klar til bruk.
- Plasser pasientens fot i den oppblåste helløfteren. Fotsålen skal hvile mot den delen av helløfteren som er markert med en tegnet fot.
- Leggen skal bæres av den store luftfylte delen i bunnen.
- Helen skal være løftet over underlaget (madrassen). Juster lufttrykket slik at helens korrekte løftehøyde oppnås (1-2 cm), dette kan gjøres mens pasientens ben blir liggende i helløfteren. Trykket i helløfteren kan senkes ved hjelp av den medfølgende pinnen, som forsiktig innføres i ventilen slik at luft slippes ut, inntil ønsket hardhet er oppnådd.
- Båndet lukkes. OBS: Båndet må ikke stramme. Før helløfteren fjernes, kan den punkteres, for eksempel ved avklipping av et hjørne.
- Kastes i vanlig avfall.
- Helløfteren brukes direkte mot huden, Helløfteren er pasientspesifikk, og må ikke brukes av flere enn én pasient. Ved tilgrising av helløfteren skal den erstattes av en ren helløfter.
- Inneholder ikke ftalater



ADVARSEL

- Advarsel: Ved for høyt trykk i helløfteren kan den bryte med høyt lydtrykk som følge.
- Helløfteren må kun fylles med atmosfærisk luft.
- Fylling av helløfteren med andre lufttyper kan medføre brannfare.
- Helløfteren må ikke komme i direkte kontakt med sår, på grunn av infeksjonsrisiko. Vedlikehold alltid korrekt trykk i helløfteren. Ved manglende trykk i helløfteren er det risiko for at trykk sår kan oppstå.
- Helløfteren må kun brukes i oppblåst tilstand.
- Må ikke brukes i nærheten av åpen ild.
- Defekte helløftere skal straks kasseres.